


BD Emerald™ 2, 5, 10 ml 3-komponentsprøjte



- Reduceret ressourceforbrug kombineret med høj produktkvalitet
- Minimerer affaldsmængden. BD Emerald har op til 30 % mindre materiale end andre sprøjter*
- Glasklar plastcylinder for kontrol af indhold
- Grønt stempel og graveret skalatryk for præcis og sikker dosering
- Robust stempelring forhindrer, at stempelstangen trækkes ud
- Ergonomisk udformet stempelstang for behageligt greb
- Mærkbar struktur på trykflade for sikker administration
- Produktionen af BD Emerald foregår udelukkende med forbrug af vedvarende energi.

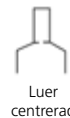

Sprøjter uden kanyler

Volumen ml	Fitting/placering	Graduering/ml	Inder/trsp.-emb.	Art.nr.
2	Luer/Centreret	0,1	100/3000	307727
3	Luer/centreret	0,1	100/2400	302986
5	Luer/Centreret	0,2	100/2000	307731
10	Luer/Centreret	0,2	100/1200	307736

Sprøjter med aftagelig kanyler

Volumen ml	Kanylestørrelse G X tommer	Kanylestørrelse Yder.Ø X længde mm	Graduering/ml	Farvekode	Inder/trsp.-emb.	Art. nr.
2	22 x 1 ¼"	0,7 x 30	0,1	Sort	100/2000	307728
2	23 x 1"	0,6 x 25	0,1	Blå	100/2000	307740
2	23 x 1 ¼"	0,6 x 30	0,1	Blå	100/2000	307741
5	21 x 1 ½"	0,8 x 40	0,2	Grøn	100/1500	307732
5	22 x 1 ¼"	0,7 x 30	0,2	Sort	100/1500	307733
5	23 x 1 ¼"	0,6 x 30	0,2	Blå	100/1500	307735
10	21 x 1 ½"	0,8 x 40	0,2	Grøn	100/900	307737
10	22 x 1 ¼"	0,7 x 30	0,2	Sort	100/900	307738

Materialeindhold:

Cylinder og stempelstang: polypropylen
 Stempel: Latexfri, termoplastisk elastomer (TPE)
 Overfladebehandling: silikoneolie
 Ansats og kanylehætte: Polypropylen
 Kanyler: Rustfrit stål (AISI 304)
 Lim: Epoxyresin
 Kanylens overfladebehandling: Silikoneolie

Indeholder ikke PVC, phthalater eller latex

Emballagemateriale:

Papir
 Transparent plastfilm (polyethylen/polyamid)
 Bølgepap



Steriliseringmetode:

Ethylenoxid



5 år

CE-mærket iht. MDD 93/42/EEC

*Baseret på sammenligning med førende mærker på verdensplan. BD 4/11 - 0840



Helping all people
live healthy lives

Medical Surgical Systems BD Danmark
 Herstedøstervej 27-29, Bygning A, 2.
 2620 Albertslund
 Tlf.: 43 43 45 66
 www.bd.com